



WHERE YOU WANT TO BE.

# LE LUXE EN MOUVEMENT

**S-SERIES**  
— PREMIUM SCOOTER RANGE —

**S400**

**S425**

**S700**

# LES SCOOTERS PREMIUMS S-SERIES

---

Luxe, dynamisme et sécurité, vous vivrez vos déplacements autrement à bord des scooters S-Series par STERLING.

Difficile de ne pas trouver son modèle tant leurs performances de conduite, leurs fonctionnalités et leur élégance sont irréprochables. La S-Series n'a pas un, mais plusieurs visages que nous vous invitons à découvrir...

S425





# ECLAIRAGE LED DIRECTIONNEL

---

**Eclairage puissant 100% LED, homologué pour un usage routier. Changer des ampoules appartient désormais au passé, grâce à la performance dans le temps de la technologie LED.**

# DESIGN INNOVANT

---


Grâce à la technologie LED, l'éclairage des scooters S-Series consomme 400 fois moins d'énergie que les ampoules standards. Autant d'énergie économisée au profit des batteries pour plus d'autonomie à chaque voyage!

---

**Voir et être vu est une question de sécurité, tous les modèles de la S-Series sont équipés d'éclairage LED hautement visible, phares, clignotants, freins...**



→ **Roulettes anti-bascule innovantes**  
Reliées aux amortisseurs, elles facilitent le franchissement et vous garantissent sécurité sur les pentes.

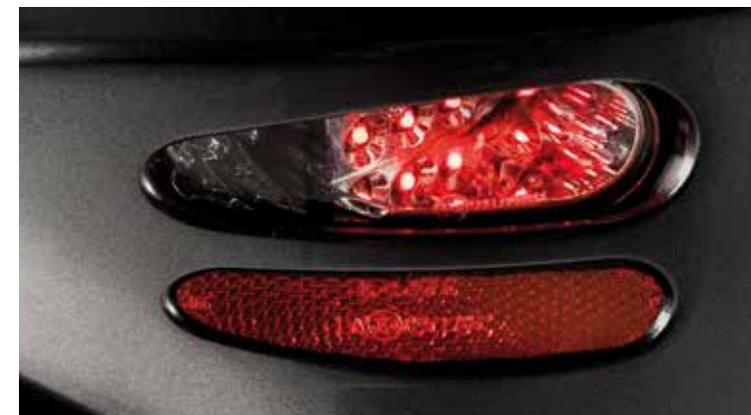

# S400

## LE COMPACT

---

Le S400 **6km/h** est très maniable et confortable. Il est aussi à l'aise dans les centres commerciaux, que sur des routes très fréquentées. Grâce à son système de suspension réglable, vous bénéficiez du plus grand confort à chacune de vos sorties.

Avec ses batteries de **38 Ah**, le S400 est idéal pour les ballades en ville. De plus, avec son éclairage LED, puissant et efficace, vous êtes aussi visible la nuit qu'en pleine journée!





Vitesse max.: **6 km/h**



Coloris: **Silver Metallic**



Batteries: **38 Ah x 2**



Diamètre des roues: **25 cm (10")**



Poids max.Utilisateur: **136 kg**



Panneau de commandes tactile imperméable. Fonctions simples à utiliser. Réglage de la vitesse, jauge batterie LED, klaxon puissant.

Accélérateur "Wig-Wag" au design unique pour se diriger avec la main ou le pouce. Le large guidon ergonomique delta rend chaque voyage des plus confortables

# COMMANDES CONCUES POUR VOUS

---

Trouver sa position de conduite idéale est un jeu d'enfant avec la colonne de direction réglable en angle, de façon continue. De plus, le phare suit l'inclinaison et la direction de la colonne pour éviter toute perte de visibilité.



Sécurité et style, chaque scooter S-Series offre deux rétroviseurs intégrés dans une coque finition carbone



Panier amovible avec anse

# S425

## LE POLYVALENT

---

Le modèle S425 réunit toutes les fonctionnalités de son petit frère, mais avec plus de puissance!

En combinant un éclairage avant/arrière LED, à un châssis suspendu efficace et le choix de deux vitesses **10 ou 12 km/h**, le S425 est adapté pour rouler sur tous les terrains.

Grâce au diamètre élevé de ses roues, plus aucun obstacle ne l'arrête, et avec ses puissantes batteries de **55 Ah**, le S425 vous invite à profiter pleinement des joies du grand air!





Vitesse max.: **10 km/h - 12 km/h**



Coloris: **Urban Grey Metallic**



Batteries: **55 Ah x 2**



Diamètre des roues: **30 cm (12")**




Poids max. Utilisateur: **150 kg**

# SIEGE GRAND LUXE

---

**Le siège multi-réglable, si raffiné et si confortable, fait de chaque trajet un pur moment de détente.**

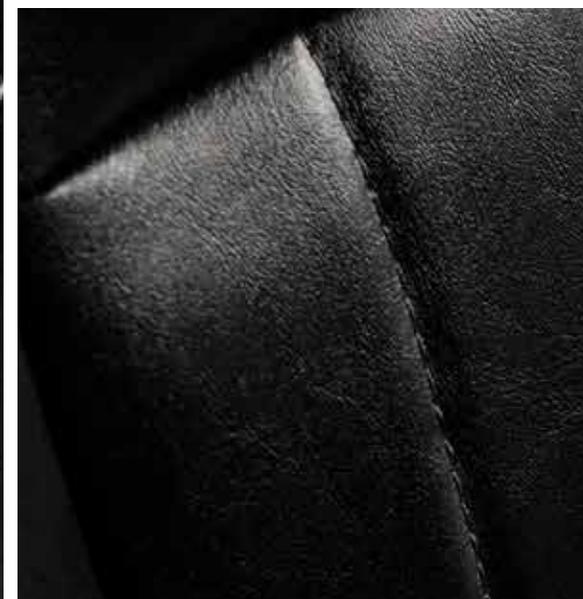

# CONFORT A CHAQUE VOYAGE

---

Le système d'assise des scooters S-SERIES, comporte ces petits secrets qui font le confort de vos voyages. De son réglage en hauteur, en profondeur et en inclinaison jusqu'aux accoudoirs relevables et ajustables en profondeur, chaque trajet est un moment de confort inoubliable!



→ Réglage en profondeur continu



→ Inclinaison de dossier rapide



→ Siège pivotant pour des transferts facilités

# S700

## LE BAROUDEUR

---

Le S700 vous invite à l'aventure!

Avec ses performances hors pair, vous pourrez compter sur lui pour aller où bon vous semble!

Ne vous préoccupez plus des distances, ses batteries de **75 Ah** et sa vitesse jusqu'à **15 km/h** se chargent de votre autonomie.

Son design a été développé pour aborder avec aisance bordures et terrains en pente. Large pneu et 4 suspensions indépendantes garantissent stabilité et confort optimal à chacune de vos sorties.





Vitesses: **10 km/h - 15 km/h**



Coloris: **Black Metallic**  
**Urban Grey Metallic**



Batteries: **75 Ah x 2**



Diamètre des roues: **33 cm (13")**



Poids max. Utilisateur: **160 kg**

# DONNEES TECHNIQUES

S-SERIES	S400	S425	S700
<b>Vitesse maximale</b>	6 km/h	10 km/h - 12 km/h	10 km/h - 15 km/h
<b>Poids max. Utilisateur</b>	136 kg	150 kg	160 kg
<b>Batteries</b>	38 Ah x 2	55 Ah x 2	75 Ah x 2
<b>Chargeur</b>	5 A	8 A	8 A
<b>Autonomie potentielle max.<sup>1</sup></b>	36 km	42 km	55 km
<b>Puissance moteurs</b>	300 W (2 pôles) - Puissance max. 1000 W	500 W (4 pôles) - Puissance max. 1200 W	800 W (4 pôles) - Puissance max. 2700 W
<b>Eclairage LED avant/arrière</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Colonne de direction réglable</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Suspensions réglables</b>	3	3	4
<b>Frein à disque par câble</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Diamètre des roues</b>	25 cm (10")	30 cm (12")	33 cm (13")
<b>Largeur / longueur totale</b>	64 cm / 134 cm	65 cm / 135 cm	66 cm / 150 cm
<b>Largeur siège x profondeur</b>	46 cm x 46 cm	49 cm x 49 cm	49 cm x 49 cm
<b>Hauteur assise - plateforme</b>	45 cm - 50 cm	45 cm - 50 cm	45 cm - 50 cm
<b>Diamètre de giration</b>	1.9 m	2.0 m	2.2 m
<b>Coloris</b>	Silver Metallic	Urban Grey Metallic	Black- / Urban Grey Metallic
<b>Poids scooter inc. batteries</b>	109 kg	117 kg	146 kg

<sup>1</sup> - Autonomie potentielle maximale basée sur des études comparatives entre des modèles et des batteries de capacité similaires.

Partout en Europe, la vie de milliers de personnes a été facilitée grâce à un scooter de mobilité STERLING, une des marques de Sunrise Medical. Depuis plus de 30 ans, STERLING a conçu et produit des scooters aux normes les plus élevées, apportant le confort et la sécurité que chacun à besoin. Pour plus d'informations sur les options de chaque modèle, veuillez consulter la fiche de mesure sur notre site internet et obtenir un format plus important de ce document via la version PDF sur [www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr).



## Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie  
 17 Rue Michaël Faraday  
 37170 Chambray-Lès-Tours  
 Tel.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
 Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03  
 E-Mail: [info@sunrisemedical.fr](mailto:info@sunrisemedical.fr)  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)